

Consejos de uso

1. No utilice la balanza en un entorno húmedo o demasiado caliente (entre 5 °C y 35 °C es lo correcto)
2. Coloque los pies correctamente en los electrodos de la balanza (en el centro). Si los coloca en los bordes, esto producirá inestabilidad en la medición.
3. Mantenga la balanza limpia. No utilice productos ácidos para limpiarla.
4. Utilice el producto sobre una superficie firme y estable.
5. Para garantizar la precisión de los datos, se recomienda realizar las mediciones en el mismo momento del día.
6. Con respecto a las mediciones de grasa corporal, el usuario debe tener más de 10 años.
7. Cuando se muestra el mensaje "Lo", debe reemplazar inmediatamente las pilas para evitar la corrosión.
8. El uso de este producto no está autorizado para personas con un estimulador cardíaco u otros implantes electrónicos.

THOMSON

iF1944B

Smart MASS 6

Impédancemètre connecté



Merci d'avoir acheté l'impédancemètre connecté THOMSON Smart Mass 6. Cet appareil va vous permettre de mesurer toutes vos données de masse corporelle : poids, masse grasse, indice de masse corporelle (IMC), masse osseuse, masse hydrique. Vous pourrez visualiser directement sur l'écran LCD poids et masse grasse, ou transférer par la technologie bluetooth l'ensemble des mesures à une des applications compatibles, après l'avoir connectée à votre pèse-personne.

Vous pourrez alors stocker et visualiser sur votre smartphone ou tablette vos différentes données, ainsi que leur évolution au fil du temps.

Applications compatibles :

Smart Mass 6 est compatible avec plusieurs applications téléchargeables gratuitement sur Play Store ou Apple store, votre choix devant s'effectuer en fonction du type de smartphone ou tablette que vous souhaitez appairer.


Si vous utilisez un smartphone ou tablette utilisant iOS (univers Apple) pour la version 11 et au-dessus, ou bien Android pour la version 4.3 et au-dessus, vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser l'application « Smart care – Thomson ».

Si vous utilisez un téléphone iOS plus ancien (Version 8 et au-dessus) vous pouvez utiliser l'application « Moving Life ».

Pour appairer smartphone/tablette et pèse personne, il vous suffit de suivre les indications qui figurent sur **l'application choisie**, après avoir **activé la fonction bluetooth de votre smartphone/tablette** et crée un compte utilisateur. L'appairage ne se fait pas via le menu du téléphone/tablette mais via l'application.


Installation des piles (non fournies)

Ouvrez le couvercle du support des piles situé derrière l'appareil, comme indiqué sur le dessin ci-dessous, puis installez les piles en phase avec la polarité indiquée à l'intérieur du support piles.

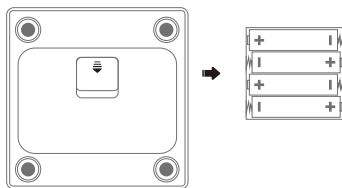

Changement de l'unité de mesure du poids kg/st.


Vous pouvez changer d'unité de mesure en actionnant le curseur qui se trouve sous le compartiment pile, comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

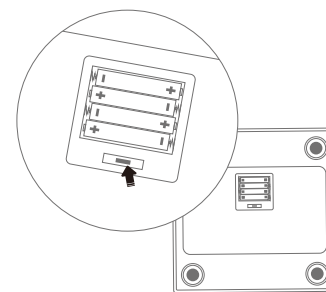

Appairer votre téléphone et votre pèse personne.

Ouvrez l'application choisie (voir ci-dessus) et actionnez la fonction bluetooth de votre téléphone/tablette.

Attention votre pèse personne doit être en état de fonctionnement lorsque vous souhaitez l'appairer à l'application. Lorsque l'appairage est effectif, l'un des symboles ci-dessous doit être affiché sans discontinuer. Lorsque l'appairage a échoué, ce même symbole se met à clignoter.

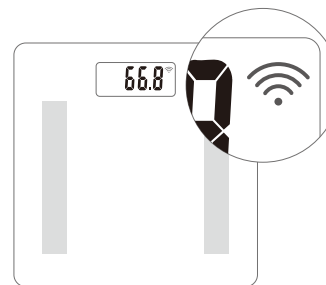


Commencez la mesure :

Pour la première mesure, assurez-vous que le pèse-personne est bien connecté avec l'application choisie, puis positionnez le sur un support solide et plat (type parquet ou carrelage), puis montez pieds nus ou en chaussettes fines sur le plateau pour démarrer la mesure.

Lorsque votre poids s'affiche sur l'écran LCD et se met à clignoter, la mesure des autres éléments corporels, comme la masse grasse débute. La mesure des autres éléments corporels est calculée en fonction des renseignements que vous aurez effectués lors de la création de votre compte utilisateur sur l'application (sexe, âge, taille etc...). Si vous n'avez pas renseigné ces informations, vos données corporelles ne pourront pas être mesurées, seul le poids sera mesuré par smart Mass 6.

Après l'affichage du poids sur le LCD du pèse personne, vous verrez apparaître votre masse grasse, puis le pèse-personne s'éteindra automatiquement. En cas de port de chaussettes trop épaisses, seul le poids et l'indice de masse corporelle pourront être mesurés.

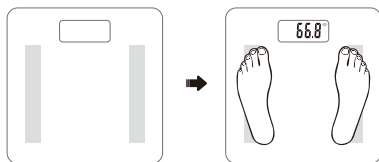

- Si vous désirez accéder à toutes les mesures, il vous faudra ouvrir l'application. Vous aurez alors accès à toutes les données.
- Ne placez pas le pèse-personne sur un tapis ou une moquette, les résultats risquent d'être erronés.
- La première mesure doit être prise avec la connexion à l'application en fonctionnement. Chaque utilisateur sera automatiquement reconnu par l'application prenant comme référence cette mesure initiale.
- Afin de mesurer correctement votre masse grasse, vous devrez positionner vos pieds sur les électrodes du pèse-personne. La surface du produit devra être propre et sèche.

Le pèse-personne peut se connecter avec 4 comptes utilisateurs distincts sur l'application « smart care -Thomson ».

Les indications d'avertissement



La mesure de la masse grasse est en cours, ne descendez pas du pèse-personne et assurez vous que vos pieds sont bien positionnés sur les électrodes



La masse grasse est trop faible, elle ne peut être mesurée. Il vous est conseillé de consulter un médecin.



L'indication de la masse grasse est trop élevée. Elle ne peut être mesurée. Il est conseillé de consulter un médecin.



Erreur de calibrage au début de la mesure, veuillez faire un nouvel essai.



Le nombre d'utilisateurs maximum a été atteint.



Les piles de votre pèse-personne sont usagées, veuillez les changer.

Conseils d'utilisations

1. N'utilisez par le pèse-personne dans un environnement humide ou trop chaud (entre 5°C et 35°C est ok)
2. Veillez à bien avoir les pieds positionnés sur les électrodes du pèse-personne (au centre). En effet si vous les positionnez sur les bords, cela conduira à une instabilité lors de la mesure.
3. Conservez le pèse-personne propre. N'utilisez pas de produit acide pour la nettoyez.
4. Veuillez utiliser le produit sur un sol ferme et stable.
5. Pour s'assurer de la précision des données, il est recommandé de prendre les mesures au même moment de la journée.
6. Concernant les mesures de masse grasse, l'utilisateur doit être âgé de plus de 10 ans.
7. Lorsque le message « Lo » s'affiche, veillez à changer au plus vite les piles afin d'éviter un phénomène de corrosion.
8. L'utilisation de ce produit n'est pas autorisée aux personnes ayant un stimulateur cardiaque ou autre implants électroniques.



Gracias por comprar el impedanciómetro inteligente THOMSON Smart Mass 6.

Este aparato le permitirá medir todos sus datos de masa corporal: peso, grasa corporal, índice de masa corporal (IMC), masa ósea, masa hídrica. Puede visualizar directamente en la pantalla LCD el peso y la grasa corporal o transferir todas las mediciones a una de las aplicaciones compatibles a través de bluetooth, una vez conectado a su balanza. Podrá almacenar y visualizar los diferentes datos en su teléfono inteligente o tableta, al igual que su evolución en el tiempo.

Aplicaciones compatibles:

Smart Mass 6 es compatible con diferentes aplicaciones descargables de manera gratuita en Play Store o Apple Store, según el tipo de teléfono o tableta que desea emparejar.


Si utiliza un teléfono o tableta con iOS (entorno Apple) para la versión 11 y superior, o bien Android para la versión 4.3 y superior, puede descargarla gratis y utilizar la aplicación "Smart care – Thomson".

Si utiliza un teléfono iOS más antiguo (Versión 8 y superior), puede utilizar la aplicación "Moving Life".

Para emparejar un teléfono/tableta y balanza, siga las indicaciones de la **aplicación escogida** una vez **activada la función bluetooth de su teléfono/tableta** y cree una cuenta de usuario. El emparejamiento no se realiza mediante el menú del teléfono/tableta sino a través de la aplicación.


Instalación de las pilas (no incluidas)

Abra la tapa del compartimento de las pilas ubicado en la parte trasera del aparato, como se indica en la siguiente figura, luego coloque las pilas según la polaridad indicada en el interior del compartimento.

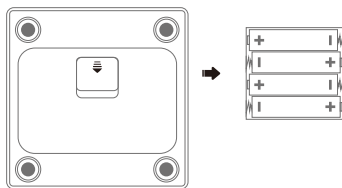

Cambio de la unidad de medida del peso kg/st/lb.


Puede cambiar la unidad de medida con el cursor que se encuentra debajo del compartimento de las pilas, como se indica en la siguiente figura.

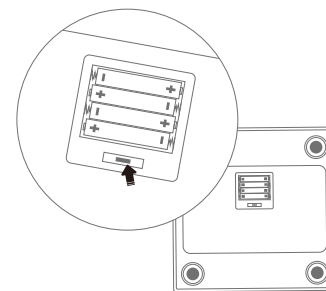

Emparejar su teléfono y su balanza.

Abra la aplicación elegida (ver más arriba) y active la función bluetooth de su teléfono/tableta.

Atención, su balanza debe estar en funcionamiento al emparejarla con la aplicación. Cuando se completa el emparejamiento, uno de los siguientes símbolos debe aparecer de manera permanente. Cuando falla el emparejamiento, el mismo símbolo parpadea.

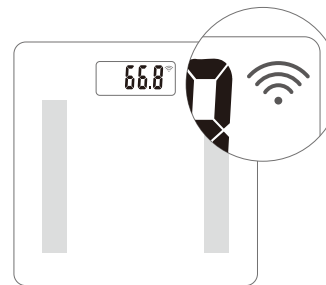


Comience a medir:

Para la primera medición, asegúrese de que la balanza esté conectada correctamente a la aplicación elegida, luego colóquela en una base sólida y plana (tipo parquet o embaldosado), luego súbbase con los pies descalzos o con calcetines finos para comenzar la medición.

Cuando la pantalla LCD muestra su peso y comienza a parpadear, comienza la medición de los demás elementos corporales, como la grasa corporal.

La medición de los demás elementos corporales se calcula en función de la información suministrada al crear su cuenta de usuario en la aplicación (sexo, edad, altura, etc.). Si no completó esta información, no podrán medirse sus datos corporales y Smart Mass 6 solo medirá el peso.

Después de mostrar el peso en la pantalla LCD de la balanza, aparecerá su grasa corporal y luego la balanza se apagará automáticamente. En caso de utilizar calcetines demasiado gruesos, solo podrán medirse el peso y el índice de masa corporal.

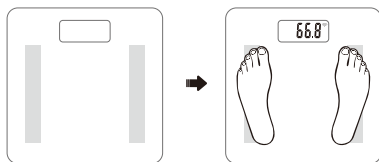

- Si desea acceder a todas las mediciones, deberá abrir la aplicación. En ella podrá conocer todos los datos.
- No coloque la balanza sobre una alfombra o moqueta, los resultados podrían ser erróneos.
- La primera medición debe realizarse con la conexión establecida con la aplicación. La aplicación reconocerá automáticamente a cada usuario y tomará como referencia esta medición inicial.
- Para medir correctamente su grasa corporal, debe colocar los pies sobre los electrodos de la balanza. La superficie del producto debe estar limpia y seca.

La balanza puede conectarse a 4 cuentas de usuario diferentes en la aplicación "smart care – Thomson"

Indicaciones de advertencia



Cuando la medición de la grasa esta en progreso, no baje de la balanza y asegúrese de que sus pies están bien colocados en los electrodos



La grasa corporal es demasiado baja, no puede medirse. Se recomienda consultar a un médico.



La grasa corporal es demasiado elevada. No puede medirse. Se recomienda consultar a un médico.



Error de calibración de la medición, intente nuevamente.



Ha alcanzado el número máximo de usuarios.



Las pilas de su balanza están gastadas, debe reemplazarlas.