

# FICHE PRATIQUE

## NETTOYAGE DU CIRCUIT PPC

Le circuit (tuyau) transporte l'air sous pression de la machine jusqu'au masque. Au fil du temps, des bactéries et impuretés peuvent s'accumuler. Un entretien régulier est essentiel pour garantir un air propre et des nuits confortables.



### 01 Méthode classique


- Débranchez le tuyau de la machine et du masque.
- Trempez le tuyau dans de l'eau tiède savonneuse et faites passer l'eau doucement d'un côté à l'autre pour bien nettoyer l'intérieur.
- Rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de savon.
- Suspendez le tuyau verticalement pour le laisser sécher complètement avant réutilisation.

**Fréquence :** Nettoyez le tuyau 1 à 2 fois par mois.

**Astuce :** Utilisez un cintre pour suspendre le tuyau et le faire sécher correctement

### 02 Option avec brosse spéciale nettoyage

- Utilisez une brosse spéciale circuit PPC pour un nettoyage en profondeur.
- Trempez le tuyau dans de l'eau tiède savonneuse et faites passer l'eau doucement d'un côté à l'autre.
- Insérez la brosse dans le tuyau et faites-la glisser jusqu'à l'autre extrémité.
- Suspendez le tuyau verticalement pour le laisser sécher complètement avant réutilisation.

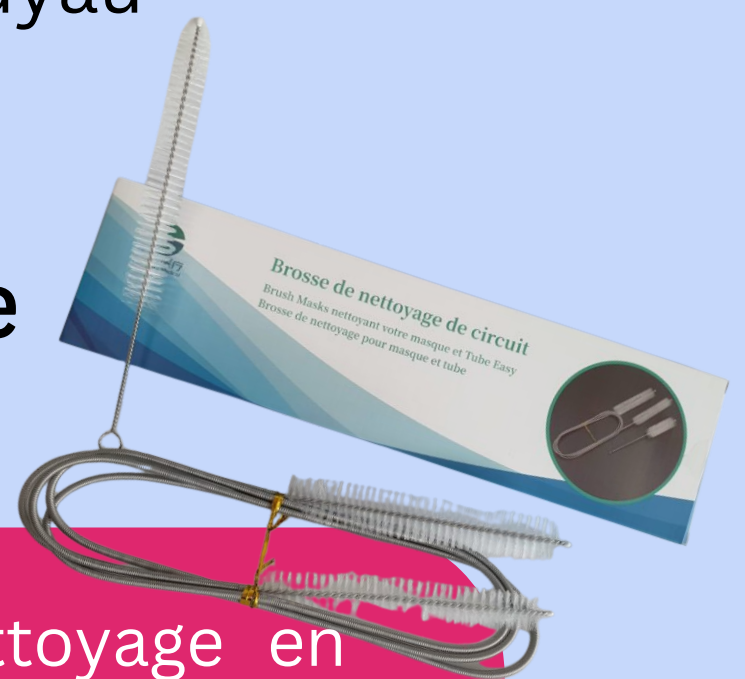

**Astuce :** une petite brosse supplémentaire est incluse pour nettoyer le masque et ses parties difficiles d'accès